

MAGNESIUM BR

CALMAGITE


Colorimetric method

ENDPOINT

<p>REF CT10312 3 x 80 mL</p> <p>CONTENTS R1.Reagent 3 x 40 mL R2.Reagent 3 x 40 mL</p>
For <i>in vitro</i> diagnostic use only

PRINCIPLE

The method¹ is based on the specific binding of calmagite, a metallochromic indicator², and magnesium at alkaline pH with the resulting shift in the absorption wavelength of the complex. The intensity of the chromophore formed is proportional to the concentration of magnesium in the sample.

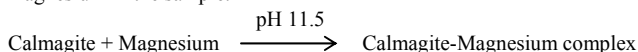

REAGENTS

R1. Chromogen. Calmagite 70 mg/mol/L, EGTA 50 mmol/L, sodium chloride 800 mmol/L, surfactant 0.05 % (w/v).

R2. Alkaline buffer. Dietanolamine 1 mg/mol/L, AMP 100 mmol/L, potassium cyanide 10 mmol/L, non-reactive stabilizers.

Xi R:36 S :22-26

REAGENTS PREPARATION

The reagents are ready to use.

STORAGE AND STABILITY

Store at 2-8°C. The reagents are stable until the expiry date stated on the label. On board the reagents are stable 30 days. After daily use store tightly closed and protected from light.

Discard if appear signs of deterioration:

- Presence of particles and turbidity.
- Blank absorbance (A) at 520 nm > 1.000 against distilled water.

SAMPLE COLLECTION

Serum or heparinized plasma free of hemolysis. Other anticoagulants (EDTA, oxalate and citrate) must not be used. Magnesium in serum or plasma is stable for 10 days at 2-8°C. Freeze for longer storage.

INTERFERENCES

- Lipemia (intralipid) may affect the results.
- Bilirubin (40 mg/dL) does not interfere.
- Hemoglobin (> 2 g/L) may affect the results.
- Other drugs and substances may interfere³.
- Many detergents and water supplies (see Notes).
- The interference by calcium is prevented by the use of EGTA into the buffer.

INSTRUMENTATION AND MATERIALS

- LIDA analyzer.
- Laboratory equipment.
- iso-Clean Solution. Ref. CT18002.
- Multicalibrator CC/H 5x5 mL. Ref. CT19750

AUTOMATED PROCEDURE

A graphic display pictures the specific sets corresponding to the technical application outlined for this test.

Any new application, to the instrument should be validated to confirm that results meet the analytical performance of the method.

It is recommended to validate periodically the instrument.

CALIBRATION

Calibration stability on board is kept for 8 days. An abnormal increase of calibration resets is usually indicative of failure in the performance of the reagents. Recalibrate when a new lot of reagents are used, when control recovery falls out range and after any adjustment made to the analyzer. A reagent blank should be run daily before sample analysis.

RESULTS

Samples with concentrations higher than 10 mg/dL should be diluted 1:2 with saline and assayed again. Multiply the results by 2.

If results are to be expressed as SI units apply: mg/dL x 0.412 = mmol/L

EXPECTED VALUES⁴

Serum, plasma

Children (2-12 years)	1.7-2.3 mg/dL (0.70-0.94 mmol/L)
Adults (12-60 years)	1.6-3.0 mg/dL (0.66-1.23 mmol/L)

It is recommended that each laboratory establishes its own reference range.

QUALITY CONTROL

To ensure adequate quality control (QC), each run should include a set of controls (normal and abnormal) with assayed values handled as unknowns. Each laboratory should establish its own Quality Control scheme and corrective actions if controls do not meet the acceptable tolerances.

DIAGNOSTIC CHARACTERISTICS

Magnesium is considered an essential nutrient and a major intracellular cation. More than 50% of the total magnesium found in the body is complexed with calcium in the skeleton; however, only 1% of total body magnesium is found in the circulation. Between 60% and 70% of serum magnesium is free; the remaining percentage is bound to albumin, phosphate, citrate, and other ions. *Hypomagnesemia* (an abnormal decrease in the level of serum magnesium) is usually associated with severe prolonged diarrhea, impairment of neuromuscular function, gastrointestinal malabsorption and alcoholism. *Hypermagnesemia* (an abnormal elevation in the level of serum magnesium) is usually associated with renal glomerular failure, dehydration, severe diabetic acidosis, and Addison's disease. Clinical diagnosis should not be made on findings of a single test result, but should integrate both clinical and laboratory data.

NOTES

- Most of the detergents and water softening products used in the labs contain chelating agents. A defective rinsing will invalidate the procedure. Keep the glassware acid washed and thoroughly rinsed at all times.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Performance characteristics are available on request.

BIBLIOGRAPHY

1. Lindstrom, F., and Diehl. Anal. Chem. 32 : 1123 (1960).
2. Anderegg, G, Flashka, H., Sallmann, R. and Schwarzenbach, G. Metallindikatoren VII. Fasciculus: 37 : 113 (1954).
3. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
4. Tietz. N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd Edition. W.B. Saunders Co. Philadelphia, PA. (1995).
5. Chauhan, U.P.S., and Sarkar, B.C.R. Anal. Biochem. 32:70 (1969).

CT1031-1/0811



MAGNESIO BR

CALMAGITA


Método colorimétrico

PUNTO FINAL

<p>REF CT10312 3 x 80 mL</p> <p>CONTENIDO R1.Reactivo 3 x 40 mL R2.Reactivo 3 x 40 mL</p> <p>Sólo para uso diagnóstico <i>in vitro</i></p>
--

FUNDAMENTO

El método¹ está basado en la unión específica de la calmagita, un indicador metalocrómico², con el magnesio a un pH alcalino con el consiguiente desplazamiento del espectro de absorción del complejo. La intensidad del cromóforo formado es proporcional a la concentración del magnesio presente en la muestra.

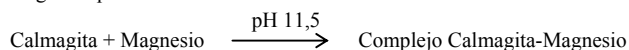

REACTIVOS

R1. Cromógeno. Calmagita 70 mg/L, EGTA 50 mmol/L, sodio cloruro 800 mmol/L, tensioactivos 0,05%.

R2. Tampón alcalino. Dietanolamina 1 mol/L, AMP 100 mmol/L, potasio cianuro 10 mmol/L, estabilizantes no-reactivos.

Xi R:36 S :22-26

PREPARACION DE LOS REACTIVOS

Los reactivos están listos para su uso.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Conservar a 2- 8°C. Los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. En el analizador es estable 30 días. Tras su uso diario, mantener los reactivos cerrados y protegidos de la luz.

Descartar si se observan signos de deterioro:

- Presencia de partículas y turbidez.
- Absorbancia del Blanco (A) a 520 > 1.000 frente agua destilada.

MUESTRAS

Suero o plasma heparinizado libre de hemólisis.

No usar otros anticoagulantes (EDTA, oxalato y citrato).

El magnesio sérico o plasmático es estable 10 días 2-8°C. Congelar para una conservación más prolongada.

INTERFERENCIAS

- Lipemia (intralipid) puede afectar los resultados.
- Bilirrubina (40 mg/dL) no interfiere.
- Hemoglobina (> 2 g/L) puede afectar los resultados.
- Otros medicamentos y sustancias pueden interferir³.
- Detergentes y suministros de agua de laboratorio (ver Notas).
- La interferencia del calcio se evita adicionando EGTA en el reactivo.

EQUIPO ADICIONAL

- Analizador LIDA.
- Material de laboratorio.
- iso-Clean Solution. Ref. CT18002.
- Multicalibrator CC/H 5x5 mL. Ref. CT19750

TECNICA AUTOMATICA

Una representación gráfica visualiza los ajustes específicos correspondientes a la aplicación técnica diseñada para este ensayo. Cualquier aplicación nueva al instrumento deberá validarse para confirmar que los resultados cumplen las características del método.

Se recomienda validar periódicamente el instrumento.

CALIBRACION

La estabilidad de calibración con los reactivos dispuestos en abierto es de 8 días. Un aumento anormal en la frecuencia de calibración esta generalmente asociada a un fallo de funcionalidad de los reactivos.

Recalibrar al emplear un lote nuevo de reactivos, cuando los valores control se hallan fuera de rango y tras cualquier ajuste realizado en el instrumento. Realizar un blanco diariamente antes de analizar las muestras.

CALCULOS

Muestras con concentraciones de magnesio superiores a 10 mg/dL se diluyen 1:2 con solución salina y repetir el ensayo. Multiplicar los resultados por 2. Para expresar los resultados en unidades SI aplicar: mg/dL x 0,412 = mmol/L

VALORES DE REFERENCIA⁴

Suero, plasma

Niños (2-12 años)	1,7-2,3 mg/dL (0,70-0,94 mmol/L)
Adultos (12-60 años)	1,6-3,0 mg/dL (0,66-1,23 mmol/L)

Se recomienda que cada laboratorio establezca su propio rango de referencia.

CONTROL DE CALIDAD

Para un control de calidad (CC) adecuado, se incluirán en cada serie controles valorados (normal y abnormal) que se tratarán como muestras problema. Cada laboratorio debe establecer su propio Control de Calidad y sus medidas correctoras cuando los controles no cumplan con las tolerancias exigidas.

SIGNIFICADO CLINICO

El magnesio es un elemento esencial y un catión intracelular de primer orden. Más del 50% del magnesio total forma parte junto con el calcio de la sustancia mineral ósea y sólo el 1% del magnesio total corporal se halla en la circulación. Entre el 60% y el 70% del magnesio en el plasma se encuentra en forma libre mientras que el porcentaje restante permanece unido a la albúmina, fosfato, citrato, y otros iones. La *hipomagnesemia* (bajo nivel de magnesio en el suero) es típicamente asociada a una alteración neuromuscular, prolongadas diarreas, síndrome de malabsorción intestinal y alcoholismo.

La *hipermagnesemia* (elevado nivel de magnesio en el suero) está asociada con el fallo glomerular renal, deshidratación, acidosis diabética severa y enfermedad de Addison. El diagnóstico clínico no debe realizarse con los resultados de un único ensayo sin atender los datos clínicos del paciente.

NOTAS

- La mayoría de detergentes y productos de tratamiento de aguas empleados en los laboratorios contienen agentes quelantes. Un enjuague deficiente invalida el procedimiento. Mantener en todo momento el material de vidrio lavado al ácido y enjuagado a fondo.

CARACTERISTICAS ANALITICAS

Las características analíticas están disponibles bajo solicitud.

REFERENCIAS

1. Lindstrom, F., y Diehl. Anal. Chem. 32 : 1123 (1960).
2. Anderegg, G, Flashka, H., Sallmann, R. y Schwarzenbach, G. Metallindikatoren VII. Fasciculus: 37 : 113 (1954).
3. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
4. Tietz. N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd Edition. W.B. Saunders Co. Philadelphia, PA. (1995).
5. Chauhan, U.P.S., y Sarkar, B.C.R. Anal. Biochem. 32:70 (1969).





Aplicaciones en LIDA 300
Applications on LIDA 300



MAGNESIUM

Two reagents method

Magnesium (3 x 80 mL), Code CT10312

USO
USE

Reactivo de diagnóstico *in vitro* para la determinación de magnesio en suero o plasma.
In vitro diagnostic reagent for the determination of magnesium in serum or plasma.

METODO
METHOD

Colorimétrico
Colorimetric

MUESTRA
SAMPLE

Suero o plasma heparinizado libre de hemólisis
Serum or heparinized plasma free of hemolysis

REACTIVOS
REAGENTS

Los reactivos R1 y R2 están listos para su uso.
The reagents R1 and R2 are ready to use.

CALIBRADOR
STANDARD

Linear Multicalibrador CC/H, Code CT19750

CONTROL CALIDAD
QUALITY CONTROL

Linear Human Multisera Normal CT19800
Linear Human Multisera Abnormal CT19850

DETERMINACIONES
NUMBER OF TESTS

222 tests/kit, Code CT10310
(no se considera el volumen muerto)
(dead volume is not taken in consideration)

LINEALIDAD
LINEARITY

Hasta 10 mg/dL
Up to 10 mg/dL

NOTA
NOTE

Para más información lea el prospecto del reactivo.
For additional information read reagent packaging insert.

NOTA DE AVISO
WARNING

La aplicación incluida se da solamente como pauta. Cualquier aplicación deberá ser validada con el fin de demostrar que se cumplen las características analíticas del método.
The reported application is given only as a guideline. Any application to an instrument should be validated to demonstrate that results meet the performance characteristics of the method.



CALIBRATION PARAMETERS

Rule:	Linear (two points)	Calibrator 1:	Deionized Water
Factor K		Calibrator 2:	Multicalibrator
Replicates	1	Calibrator 3:	
Interval		Calibrator 4:	
Sensitivity		Calibrator 5:	
Coefficient		Calibrator 6:	
Error Limit			
Blank response			
Difference Limit			
SD			

TEST PARAMETERS

No.	
Test	MG
Method	Endpoint
Direction	Ascend
Unit	mg/dL
Decimals	2
Prim. Wave.	510
Sec. Wave.	700
Sample Vol. (µL)	3.5
R1 Vol. (µL)	180
R2 Vol. (µL)	180
Line. Limit	20
Incubation	5
Reaction	0 15
Antigen	<input type="checkbox"/> Check Antigen
Substrate	0
Response	L Limit 0 U Limit 0
S. Volume	0
Ratio	0
R1 Blank	L Limit 0 U Limit 0
Mix. R Blank	L Limit 0 U Limit 0
Linearity	L Limit 0 U Limit 10
Full Name	MAGNESIUM
Print No.	

For other instrument software version please contact with LINEAR

MAGNESIUM BR

CALMAGITE

Colorimetric method

ENDPOINT

REF CT10310 2 x 40 mL CONTENTS R1.Reagent 1 x 40 mL R2.Reagent 1 x 40 mL
For <i>in vitro</i> diagnostic use only

PREPARACION DE LOS REACTIVOS

Reactivo de trabajo. Mezclar 1 volumen de R1 + 1 volumen de R2. Estable 1 semana a temperatura ambiente 16-25°C. Mantener tapado y protegido de la luz.

TECNICA MANUAL

- Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente.
- Pipetear en tubos rotulados:

TUBOS	Blanco	Muestra	Patrón
Reactivo de trabajo	1,0 mL	1,0 mL	1,0 mL
Muestra	-	10 µL	-
Patrón	-	-	10 µL

- Mezclar y reposar los tubos 2 minutos a temperatura ambiente.
- Leer la absorbancia (A) de la muestra y el patrón a 520 nm frente al blanco de reactivo.

El color es estable como mínimo 1 hora.

CALCULOS

Suero, plasma

$$\frac{A_{\text{Muestra}}}{A_{\text{Patrón}}} \times C_{\text{Patrón}} = \text{mg/dL magnesio}$$

PREPARAZIONE DEI REAGENTI

Reagente di lavoro. Miscelare 4 mL di R1 + 1 mL di R2. Stabile per 1 settimana a temperatura ambiente 16-25°C. Mantenere chiuso e protetto dalla luce.

PROCEDURA MANUALE

- Portare reagenti e campioni a temperatura ambiente.
- Pipettare in provette etichettate:

PROVETTE	Bianco	Campione	Standard
Reagente di lavoro	1,0 mL	1,0 mL	1,0 mL
Campione	-	10 µL	-
Standard	-	-	10 µL

- Miscelare e incubare le provette per 2 minuti a temperatura ambiente.
- Leggere l'assorbanza (A) del campione e lo standard a 520 nm contro bianco reagente.

Il colore è stabile come minimo 1 ora.

CALCOLI

Siero, plasma

$$\frac{A_{\text{Campione}}}{A_{\text{Standard}}} \times C_{\text{Standard}} = \text{mg/dL magnesio}$$

A Standard

REAGENT PREPARATION

Working reagent Mix 1 volume of R1 + 1 volume of R2 Stable for 1 week at room temperature (16-25°C). Protect from light.

MANUAL PROCEDURE

- Bring reagents and samples to room temperature.
- Pipette into labelled test tubes:

TUBES	Blank	Sample	Standard
Working reagent	1.0 mL	1.0 mL	1.0 mL
Sample	-	10 µL	-
Standard	-	-	10 µL

- Mix and let the tubes stand 2 minutes at room temperature.
- Read the absorbance (A) of the samples and the standard at 520 nm against the reagent blank.

The color is stable for at least 1 hour.

CALCULATIONS

Serum, plasma

$$\frac{A_{\text{Sample}}}{A_{\text{Standard}}} \times C_{\text{Standard}} = \text{mg/dL magnesium}$$

A Standard