

# MAGNESIUM BR

CALMAGITE


Colorimetric method

ENDPOINT

<b>REF KR10310</b> 1 x 40 mL <b>CONTENTS</b> R1.Reagent 1 x 20 mL R2.Reagent 1 x 20 mL
For <i>in vitro</i> diagnostic use only

## PRINCIPLE

The method<sup>1</sup> is based on the specific binding of calmagite, a metallochromic indicator<sup>2</sup>, and magnesium at alkaline pH with the resulting shift in the absorption wavelength of the complex. The intensity of the chromophore formed is proportional to the concentration of magnesium in the sample.

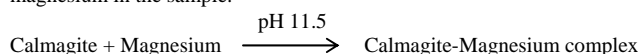

## REAGENTS

**R1. Chromogen.** Calmagite 70 mmol/L, EGTA 50 mmol/L, sodium chloride 800 mmol/L, surfactant 0.05 % (w/v).

**R2. Alkaline buffer.** Dietanolamine 1 mol/L, AMP 100 mmol/L, potassium cyanide 10 mmol/L, non-reactive stabilizers.

**Xi R:36 S :22-26**

## REAGENTS PREPARATION

The reagents are ready to use.

## STORAGE AND STABILITY

Store at 2-8°C. The reagents are stable until the expiry date stated on the label. On board the reagents are stable 30 days. After daily use store tightly closed and protected from light.

Discard if appear signs of deterioration:

- Presence of particles and turbidity.
- Blank absorbance (A) at 520 nm > 1.000 against distilled water.

## SAMPLE COLLECTION

Serum or heparinized plasma free of hemolysis. Other anticoagulants (EDTA, oxalate and citrate) must not be used. Magnesium in serum or plasma is stable for 10 days at 2-8°C. Freeze for longer storage.

## INTERFERENCES

- Lipemia (intralipid) may affect the results.
- Bilirubin (40 mg/dL) does not interfere.
- Hemoglobin (> 2 g/L) may affect the results.
- Other drugs and substances may interfere<sup>3</sup>.
- Many detergents and water supplies (see Notes).
- The interference by calcium is prevented by the use of EGTA into the buffer.

## INSTRUMENTATION AND MATERIALS

- KROMA analyzer.
- Laboratory equipment.
- iso-Clean Solution. Ref. CT18002.
- Multicalibrator CC/H 5x5 mL Ref. CT19750

## AUTOMATED PROCEDURE

A graphic display pictures the specific sets corresponding to the technical application outlined for this test.

Any new application, to the instrument should be validated to confirm that results meet the analytical performance of the method.

It is recommended to validate periodically the instrument.

## CALIBRATION

Calibration stability on board is kept for 8 days. An abnormal increase of calibration resets is usually indicative of failure in the performance of the reagents. Recalibrate when a new lot of reagents are used, when control recovery falls out range and after any adjustment made to the analyzer. A reagent blank should be run daily before sample analysis.

## RESULTS

Samples with concentrations higher than 10 mg/dL should be diluted 1:2 with saline and assayed again. Multiply the results by 2.

If results are to be expressed as SI units apply: mg/dL x 0.412 = mmol/L

## EXPECTED VALUES<sup>4</sup>

Serum, plasma

Children (2-12 years)	1.7-2.3 mg/dL (0.70-0.94 mmol/L)
Adults (12-60 years)	1.6-3.0 mg/dL (0.66-1.23 mmol/L)

It is recommended that each laboratory establishes its own reference range.

## QUALITY CONTROL

To ensure adequate quality control (QC), each run should include a set of controls (normal and abnormal) with assayed values handled as unknowns. Each laboratory should establish its own Quality Control scheme and corrective actions if controls do not meet the acceptable tolerances.

## DIAGNOSTIC CHARACTERISTICS

Magnesium is considered an essential nutrient and a major intracellular cation. More than 50% of the total magnesium found in the body is complexed with calcium in the skeleton; however, only 1% of total body magnesium is found in the circulation. Between 60% and 70% of serum magnesium is free; the remaining percentage is bound to albumin, phosphate, citrate, and other ions. *Hypomagnesemia* (an abnormal decrease in the level of serum magnesium) is usually associated with severe prolonged diarrhea, impairment of neuromuscular function, gastrointestinal malabsorption and alcoholism. *Hypermagnesemia* (an abnormal elevation in the level of serum magnesium) is usually associated with renal glomerular failure, dehydration, sever diabetic acidosis, and Addison's disease. Clinical diagnosis should not be made on findings of a single test result, but should integrate both clinical and laboratory data.

## NOTES

- Most of the detergents and water softening products used in the labs contain chelating agents. A defective rinsing will invalidate the procedure. Keep the glassware acid washed and thoroughly rinsed at all times.

## PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Performance characteristics are available on request.

## BIBLIOGRAPHY

1. Lindstrom, F., and Diehl. Anal. Chem. 32 : 1123 (1960).
2. Anderegg, G, Flashka, H., Sallmann, R. and Schwartzbach, G. Metallindikatoren VII. Fasciculus: 37 : 113 (1954).
3. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
4. Tietz. N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3<sup>rd</sup> Edition. W.B. Saunders Co. Philadelphia, PA. (1995).
5. Chauhan, U.P.S., and Sarkar, B.C.R. Anal. Biochem. 32:70 (1969).

KR1031-2/0811



# MAGNESIO BR

CALMAGITA


Método colorimétrico

PUNTO FINAL

<p><b>REF KR10310</b> 1 x 40 mL</p> <p><b>CONTENIDO</b> R1.Reactivo 1 x 20 mL R2.Reactivo 1 x 20 mL</p> <p>Sólo para uso diagnóstico <i>in vitro</i></p>
--

## FUNDAMENTO

El método<sup>1</sup> está basado en la unión específica de la calmagita, un indicador metalocrómico<sup>2</sup>, con el magnesio a un pH alcalino con el consiguiente desplazamiento del espectro de absorción del complejo. La intensidad del cromóforo formado es proporcional a la concentración del magnesio presente en la muestra.

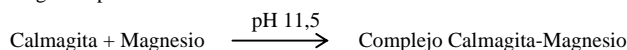

## REACTIVOS

**R1. Cromógeno.** Calmagita 70 mmol/L, EGTA 50 mmol/L, sodio cloruro 800 mmol/L, tensioactivos 0,05%.

**R2. Tampón alcalino.** Dietanolamina 1 mol/L, AMP 100 mmol/L, potasio cianuro 10 mmol/L, estabilizantes no-reactivos.

**Xi R:36 S :22-26**

## PREPARACION DE LOS REACTIVOS

Los reactivos están listos para su uso.

## ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Conservar a 2-8°C. Los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. En el analizador es estable 30 días. Tras su uso diario, mantener los reactivos cerrados y protegidos de la luz.

Descartar si se observan signos de deterioro:

- Presencia de partículas y turbidez.
- Absorbancia del Blanco (A) a 520 > 1.000 frente agua destilada.

## MUESTRAS

Suero o plasma heparinizado libre de hemólisis.

No usar otros anticoagulantes (EDTA, oxalato y citrato).

El magnesio sérico o plasmático es estable 10 días 2-8°C. Congelar para una conservación más prolongada.

## INTERFERENCIAS

- Lipemia (intraplipid) puede afectar los resultados.
- Bilirrubina (40 mg/dL) no interfiere.
- Hemoglobina (> 2 g/L) puede afectar los resultados.
- Otros medicamentos y sustancias pueden interferir<sup>3</sup>.
- Detergentes y suministros de agua de laboratorio (ver Notas).
- La interferencia del calcio se evita adicionando EGTA en el reactivo.

## EQUIPO ADICIONAL

- Analizador KROMA.
- Material de laboratorio.
- iso-Clean Solution. Ref. CT18002.
- Multicalibrator CC/H 5x5 mL. Ref. CT19750

## TECNICA AUTOMATICA

Una representación gráfica visualiza los ajustes específicos correspondientes a la aplicación técnica diseñada para este ensayo. Cualquier aplicación nueva al instrumento deberá validarse para confirmar que los resultados cumplen las características del método.

Se recomienda validar periódicamente el instrumento.

## CALIBRACION

La estabilidad de calibración con los reactivos dispuestos en abierto es de 8 días. Un aumento anormal en la frecuencia de calibración esta generalmente asociada a un fallo de funcionalidad de los reactivos.

Recalibrar al emplear un lote nuevo de reactivos, cuando los valores control se hallan fuera de rango y tras cualquier ajuste realizado en el instrumento. Realizar un blanco diariamente antes de analizar las muestras.

## CALCULOS

Muestras con concentraciones de magnesio superiores a 10 mg/dL se diluyen 1:2 con solución salina y repetir el ensayo. Multiplicar los resultados por 2. Para expresar los resultados en unidades SI aplicar: mg/dL x 0,412 = mmol/L

## VALORES DE REFERENCIA<sup>4</sup>

Suero, plasma

Niños (2-12 años)	1,7-2,3 mg/dL (0,70-0,94 mmol/L)
Adultos (12-60 años)	1,6-3,0 mg/dL (0,66-1,23 mmol/L)

Se recomienda que cada laboratorio establezca su propio rango de referencia.

## CONTROL DE CALIDAD

Para un control de calidad (CC) adecuado, se incluirán en cada serie controles valorados (normal y abnormal) que se tratarán como muestras problema. Cada laboratorio debe establecer su propio Control de Calidad y sus medidas correctoras cuando los controles no cumplan con las tolerancias exigidas.

## SIGNIFICADO CLINICO

El magnesio está considerado como un nutriente esencial y un catión intracelular de primer orden. Más del 50% del magnesio total forma parte junto con el calcio de la sustancia mineral ósea y sólo el 1% del magnesio total corporal se halla en la circulación. Entre el 60% y el 70% del magnesio en el plasma se encuentra en forma libre mientras que el porcentaje restante permanece unido a la albúmina, fosfato, citrato, y otros iones. La *hipomagnesemia* (bajo nivel de magnesio en el suero) está generalmente asociada a una alteración neuromuscular, prolongadas diarreas, síndrome de malabsorción intestinal y alcoholismo.

La *hipermagnesemia* (elevado nivel de magnesio en el suero) está asociada con el fallo glomerular renal, deshidratación, acidosis diabética severa y enfermedad de Addison. El diagnóstico clínico no debe realizarse con los resultados de un único ensayo sin atender los datos clínicos del paciente.

## NOTAS

- La mayoría de detergentes y productos de tratamiento de aguas empleados en los laboratorios contienen agentes quelantes. Un enjuague defectuoso invalida el procedimiento. Mantener en todo momento el material de vidrio lavado al ácido y enjuagado a fondo.

## CARACTERISTICAS ANALITICAS

Las características analíticas están disponibles bajo solicitud.

## REFERENCIAS

1. Lindstrom, F., y Diehl. Anal. Chem. 32 : 1123 (1960).
2. Anderegg, G, Flashka, H., Sallmann, R. y Schwartzbach, G. Metallindikatoren VII. Fasciculus: 37 : 113 (1954).
3. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
4. Tietz. N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3<sup>rd</sup> Edition. W.B. Saunders Co. Philadelphia, PA. (1995).
5. Chauhan, U.P.S., y Sarkar, B.C.R. Anal. Biochem. 32:70 (1969).





Aplicaciones en KROMA  
*Applications on KROMA*

## MAGNESIUM BR

Two reagents method

Magnesium BR (1 x 40 mL), Code KR10310

**USO**  
*USE*

**Reactivo de diagnóstico *in vitro* para la determinación de magnesio en suero o plasma.**  
*In vitro diagnostic reagent for the determination of magnesium in serum or plasma.*

**METODO**  
*METHOD*

**Colorimétrico**  
*Colorimetric*

**MUESTRA**  
*SAMPLE*

**Suero o plasma heparinizado libre de hemólisis**  
*Serum or heparinized plasma free of hemolysis*

**REACTIVOS**  
*REAGENTS*

**Los reactivos R1 y R2 están listos para su uso.**  
*The reagents R1 and R2 are ready to use.*

**CALIBRADOR**  
*STANDARD*

**Linear Multicalibrador CC/H, Code CT19750**

**CONTROL CALIDAD**  
*QUALITY CONTROL*

**Linear Human Multisera Normal CT19800**  
**Linear Human Multisera Abnormal CT19850**

**DETERMINACIONES**  
*NUMBER OF TESTS*

**133 tests/kit, Code KR10310**  
**(no se considera el volumen muerto)**  
*(dead volume is not taken in consideration)*

**LINEALIDAD**  
*LINEARITY*

**Sin post-dilución automática: Hasta 10 mg/dL**  
*Without automatic post-dilution: Up to 10 mg/dL*

**NOTA**  
*NOTE*

**Para más información lea el prospecto del reactivo.**  
*For additional information read reagent packaging insert.*

**NOTA DE AVISO**  
*WARNING*

**La aplicación incluida se da solamente como pauta. Cualquier aplicación deberá ser validada con el fin de demostrar que se cumplen las características analíticas del método.**  
*The reported application is given only as a guideline. Any application to an instrument should be validated to demonstrate that results meet the performance characteristics of the method.*



**General Info**

Name: Magnesium Code: MG Barcode: c3 Unit: mg/dl Decimal digits: 2

Visible:  Type: Endpoint Na+ No. of rgt: 2 Multiply diluted result:

Notes:

---

**Filters**

F1: 505nm F2: not used

**Volumes [microlitres]**

Sample: 3

R1: 150 R2: 150 R3: 0

**Bottle sizes**

R1: 30 ml R2: 20 ml R3: 20 ml

**Incubation/Reading time [sec]**

Substrate/Sample Start: Sample Start

R1,S -> R2: 120 R1,R2,S -> R3: 36 Final incub.: 300

**Reference Ranges**

Sample type: Serum

Patient...	Min	Max
Female	0.00	0.00
Male	0.00	0.00
Paediatric	0.00	0.00

**Instrument Factor (Y = ax + b)**

a: 1.000 b: 0.000

**Controls**

C1  C2  C3

**Reagents**

Include blank in calc.

Blank Abs (min; max): 0.02 1

Reagent linearity: 10

Detection limit: 0.08

**Calibrations**

No. of Standards: 2

Piecewise Linear Calib. Curve

**Formula Builder** **Print** **Delete** **Save**

Name	N. of Standards	N. of rep.	Units	Stability
Magnesium BR	2	1	mg/dL	

Dil.ratio	Std value	O.D.	Reagent ...
	*		

Factor	Factor Min	Factor Max

\* entered by the user

KR10310-1/0907

